


# HeartSine Gateway

MET LIFELINKCENTRAL™

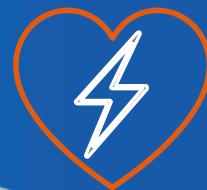

**HeartSine Gateway maakt het mogelijk om eenvoudig op afstand informatie te verkrijgen van één of meerdere HeartSine AED's.**

Bij integratie in een HeartSine Samaritan PAD 350P, 360P of 500P communiceert de HeartSine Gateway via wifi met LIFELINKcentral™ AED-programmabeheerder of het LIFENET® systeem, de resultaten van de wekelijkse AED-zelftest, inclusief of de AED-batterij leeg is.

- ✓ Draadloze verbinding
- ✓ Zelfcontrole
- ✓ Achterwaarts compatibel
- ✓ Lage eigendomskosten

## Eenvoudig inzicht in de status van uw AED

### **Verbonden**

Communiqueert via wifi met LIFELINKcentral AED Program Manager of LIFENET System om AED's op één of meerdere locaties te beheren.

### **LIFELINKcentral AED Program Manager**

Bewaakt AED-programmabeheer en volgt de gereedheidsstatus van de AED, Pad-Pak™ expiraties, CPR/AED-trainingscertificaten en meer. Het LIFELINKcentral AED-programmabeheer is tevens beschikbaar voor het beheer van uw LIFEPAK CR2 AED's.

### **Zelfcontrole**

Bewaakt onafhankelijk zijn eigen gereedheid, stuurt e-mailwaarschuwingen wanneer deze een laag batterijvermogen bereikt of buiten het operationele temperatuurbereik is.

## Gemaakt voor u

### **Achterwaarts compatibel**

Compatibel met HeartSine SAM 350P, SAM 360P en SAM 500P AED's vanaf het productiejaar 2013, of geleverd als onderdeel van de HeartSine Connected AED-oplossing.

### **Gemakkelijk in te stellen**

Eenvoudige en probleemloze installatie met de HeartSine Gateway-configuratietool.


## Eenvoudig in onderhoud

### **Werkend op eigen kracht**

Behoudt de levensduur van de AED-batterij omdat die op eigen kracht werkt met kant-en-klare batterijen.

### **Bescherming in moeilijke omgevingen**

Biedt dezelfde vrijwel ongeëvenaarde bescherming tegen stof en water als de AED.

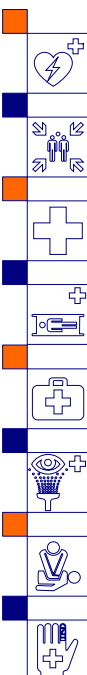



## Besturingselementen

**Aan/uit-knop:** Indien uitgeschakeld en zes seconden ingedrukt gehouden, gaat de HeartSine Gateway naar de instelmodus; en indien ingeschakeld en ingedrukt, wordt het handmatig inchecken gestart..

## Verbindingen

**Gegevenspoortconnector:** Verbindt de HeartSine Gateway met de HeartSine AED.  
**Micro-USB poort:** Schakelt de verbinding met de Saver EVO™ software via een Micro USB-kabel in.

## Gebruikersinterface

**Statusindicator:** Geeft informatie over de status van de HeartSine Gateway.  
**Verwijderingstoel:** Koppelt de HeartSine Gateway los van de HeartSine AED.

## Fysieke kenmerken

**Met geïnstalleerde batterijen**  
**Grootte:** 17 cm x 7 cm x 5 cm (6,69 in x 2,76 in x 1,97 in)  
**Gewicht:** 1,285 kg (2.83 lb)

## Milieu

**Bedrijfs-/standby-temperatuur:** 0°C tot 50°C (32°F tot 122°F)  
**Transporttemperatuur:** -10°C tot 50°C (14°F tot 122°F) tot twee dagen. Als het apparaat bij een temperatuur lager dan 0°C (32°F) wordt bewaard, moet het ten minste 24 uur voor gebruik worden teruggebracht naar een omgevingstemperatuur tussen 0°C en 50°C (32°F en 122°F)  
**Relatieve luchtvochtigheid:** 5% tot 95% niet-condenserend  
**Behuizing:** IEC 60529 IP56  
**Hoogte:** 0 tot 4572 meter (0 tot 15.000 voet)  
**Schok:** MIL-STD 810F: 2000 methode 516,5 procedure 1  
**Trilling:** MIL-STD 810F: 2000 methode 514,5 procedure 1 categorieën 4 & 7  
**EMC:** IEC 60601-1-2

## Batterij

**Type:** CR123A 3V, Niet-oplaadbaar  
**Typenummer:** 6205  
**Aanwijzing IEC:** CR 17345  
**Hoeveelheid:** Vier  
**Gewicht (per batterij):** 17 g  
**Systeem:** Lithium mangaandioxide / organische elektrolyt  
**UL-herkenning:** MH 13654 (N)  
**Nominale spanning (per batterij):** 3V  
**Normale capaciteitsbelasting:** 100 Ohm, bij 20°C, 1550 mAh omlaag tot 2V  
**Volume:** 7 cm (0,43 in3)

## Communicatie

Draadloze 802.11 b/g/n gegevensoverdracht naar LIFELINKcentral AED-programmabeheerder of LIFENET-systeem. USB-verbinding met Saver EVO software via Micro USB-poort.

## Compatibiliteit

Compatibel met alle HeartSine samaritan PAD-modellen geproduceerd in of na 2013 (met een serienummer begint met '13' of hoger).

## Garantie

2 jaar beperkte garantie.

