

Samaritan PAD Trainer


Trainingsunit met afstandsbediening



HeartSine®

Inventor. Innovator. Lifesaver.

Zowel voor de PAD 350P, de PAD 360P en de PAD 500P is een bijpassende trainer beschikbaar waarmee het reanimatieproces van begin tot eind gesimuleerd kan worden.

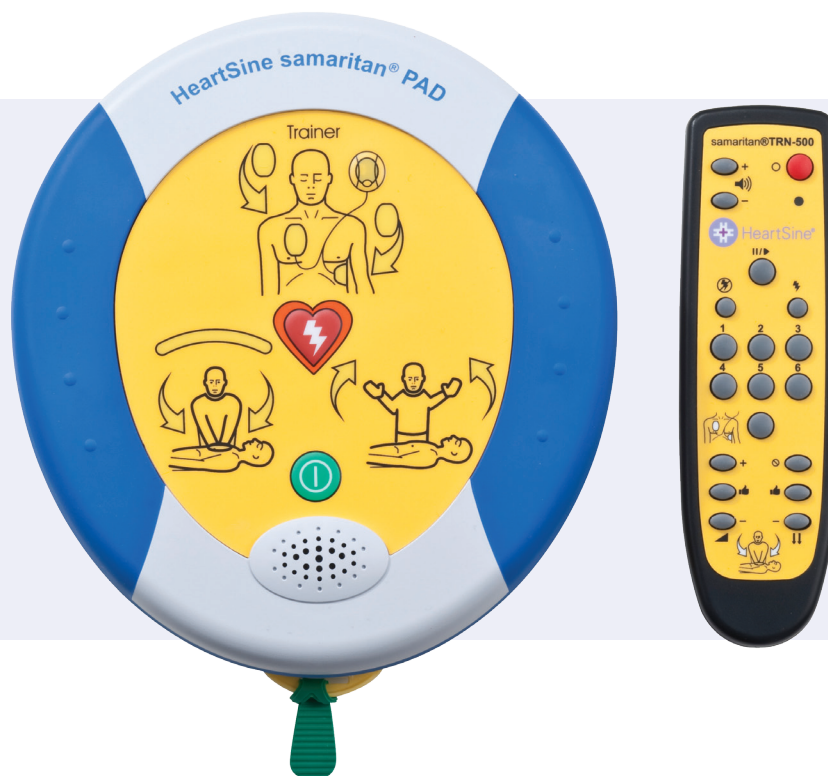

Samaritan PAD 350T trainer

De halfautomatische 350T geeft zowel gesproken als visuele instructies en begeleidt de gebruiker stap voor stap door het reanimatieproces. Een metronoom geeft het tempo aan waarmee de hartmassage uitgevoerd moet worden. Als de AED aangeeft dat er een schok gegeven moet worden moet de gebruiker zelf de schoktoets indrukken.

Samaritan PAD 360T trainer

De 360T heeft dezelfde technische specificaties als de 350P maar is volautomatisch. De gebruiker hoeft dus niet zelf op de schoktoets te drukken.

Samaritan PAD 500T trainer

De 500T heeft als extra feature een 'reanimatiecoach'. Hiermee kan de opleider feedback geven op de kwaliteit van de uitgevoerde reanimatie, net zoals de 500P dat doet.

Pakket HeartSine Samaritan PAD Trainer

Complete trainingsmodule

De Samaritan PAD Trainer met afstandsbediening begeleidt gebruikers stap voor stap door het reanimatieproces.

Aan de hand van gesimuleerde analyses, het uitvoeren van de hartmassage en het toedienen van een (gesimuleerde) schok krijgt de gebruiker een duidelijk beeld van de werking van de Samaritan PAD.

Realistisch

De realistische stem, de visuele aanwijzingen op het scherm en de gesproken instructies komen overeen met die van de HeartSine Samaritan PAD defibrillator. Zelfs de grootte en vorm zijn exact hetzelfde. De unieke labeling en kleur voorkomt dat onbedoeld gebruik wordt gemaakt van de AED-trainer in een noodsituatie.

Simulatie van diverse "real life" scenario's

De multifunctionele afstandsbediening biedt u de mogelijkheid om te kiezen uit zes verschillende scenario's. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor een scenario waarbij er een schok wordt toegediend. Ook kan de beademing achterwege worden gelaten. De afstandsbediening kan zelfs opereren met verschillende trainers tegelijkertijd (binnen een bereik van 3-5 meter). De trainer kan in combinatie met iedere reanimatiepop worden gebruikt.



Geschikt voor alle vaardigheidsniveaus

De trainer kan worden gebruikt door bedrijven om werknemers te trainen in het gebruik van de HeartSine Samaritan PAD. Bovendien voldoet de trainer aan alle eisen van de professionele opleider. De 350T is dus ook uitstekend geschikt om cursisten op te leiden.

Voordelig

De trainer wordt geleverd met een adapter en is dus oplaadbaar. De pads van de trainer zijn herbruikbaar en voordelig in aanschaf.



Het HeartSine Samaritan PAD trainer-pakket bestaat uit:

- Trainer met robuuste draagtas
- Afstandsbediening met AAA-batterijen
- Oplader
- Vijf paar trainingselektroden
- Handleiding



Scenarios

De HeartSine Samaritan PAD trainer werkt volgens de ERC 2010 richtlijnen en zal maximaal één schok per keer afgeven, gevolgd door twee minuten hartmassage. Hierna zal de trainer opnieuw een analyse uitvoeren. Een metronoom (110 piepjes per minuut) geeft aan in welk tempo de hartmassage uitgevoerd moet worden.

De trainingen bestaan uit de volgende scenario's:

- Compleet scenario. Schok geadviseerd (SA), gevolgd door CPR
- Compleet scenario. Geen schok geadviseerd (NSA), gevolgd door CPR
- Controle PAD, gevolgd door 'schok geadviseerd' en CPR
- Start direct met de analyse, gevolgd door SA & CPR, SA & CPR, en NSA & CPR
- SA, gevolgd door CPR, 30 borstcompressie en 2 beademingen.
- NSA, gevolgd door CPR, 30 borstcompressie en 2 beademingen.

Productkenmerken en details

Kenmerken

Opwindmechanisme

Nieuw

De pads en kabels zijn na iedere trainingssessie weer gemakkelijk op te bergen.

Oplaadbare batterij

Nieuw

De batterij van de trainer is oplaadbaar, met een volle batterij kan maar liefst zeven uur getraind worden. De batterij is in slechts vier uur volledig op te laten.

Batterijstatusindicator

Nieuw

LED's geven aan wat de oplaadstatus is (als de trainer niet in gebruik is) en of de trainer bijna opgeladen moet worden (als de trainer in gebruik is).

Pauzeknop

Verbeterd

Mogelijkheid om de trainer te pauzeren om vervolgens weer de trainingsscenario's te hervatten.

Volume

Verbeterd

Het volumeniveau is aan te passen, er zijn vier verschillende niveaus.

Selecteerbare trainingsscenario's

Verbeterd

Er zijn zes verschillende trainingsscenario's. U kunt er voor kiezen om de prompts voor de beademing achterwege te laten.

Training pads

Verbeterd

Vijf sets (herbruikbaar). De elektroden zijn verbonden met de trainer-padpak. De pads zijn makkelijk te verwisselen.

Updates

Updates voor de trainer zijn kosteloos beschikbaar op de website www.heartsine.com.

Verschillende talen beschikbaar

Er zijn negenentwintig talen beschikbaar voor de AED-trainer.

Product details (TRN-350-xx)

Specifications

- Gewicht: 0.6 KG
- Batterij: Oplaadbaar
- Inclusief: afstandsbediening met AAA-batterijen, trainer-padpak, oplader, draagtas, gebruikershandleiding en vijf paar trainingselektroden.

Vervangbare accessoires

- Afstandsbediening (TRN-ACC-16)
- Data kabel (PAD-ACC-02)
- Pad-Pak Elektroden (TRN-PAK-04)
- Oplader (TRN-ACC-14)
- Elektroden 10/pak (TRN-ACC-02), 25/ Pak (TRN-ACC-03)